


Hologic Affirm™

Accessorio per biopsia in posizione verticale con braccio laterale

Ottimizza il tuo approccio. Ora, grazie all'accessorio per biopsia in posizione verticale con braccio laterale Hologic® Affirm™ per il sistema Selenia® Dimensions®, potrai raggiungere con sicurezza il target ed eseguire in modo ottimale le biopsie di lesioni impegnative, come ad esempio quelle su mammelle sottili. **Questo dispositivo versatile, di facile impiego,** permette un accesso dell'ago parallelo al detettore sia dalla posizione laterale sinistra che da quella laterale destra. In questo modo potrai scegliere l'approccio ottimale in base all'anatomia di ogni paziente e alla sede della lesione così da accelerare e semplificare le procedure biotiche.

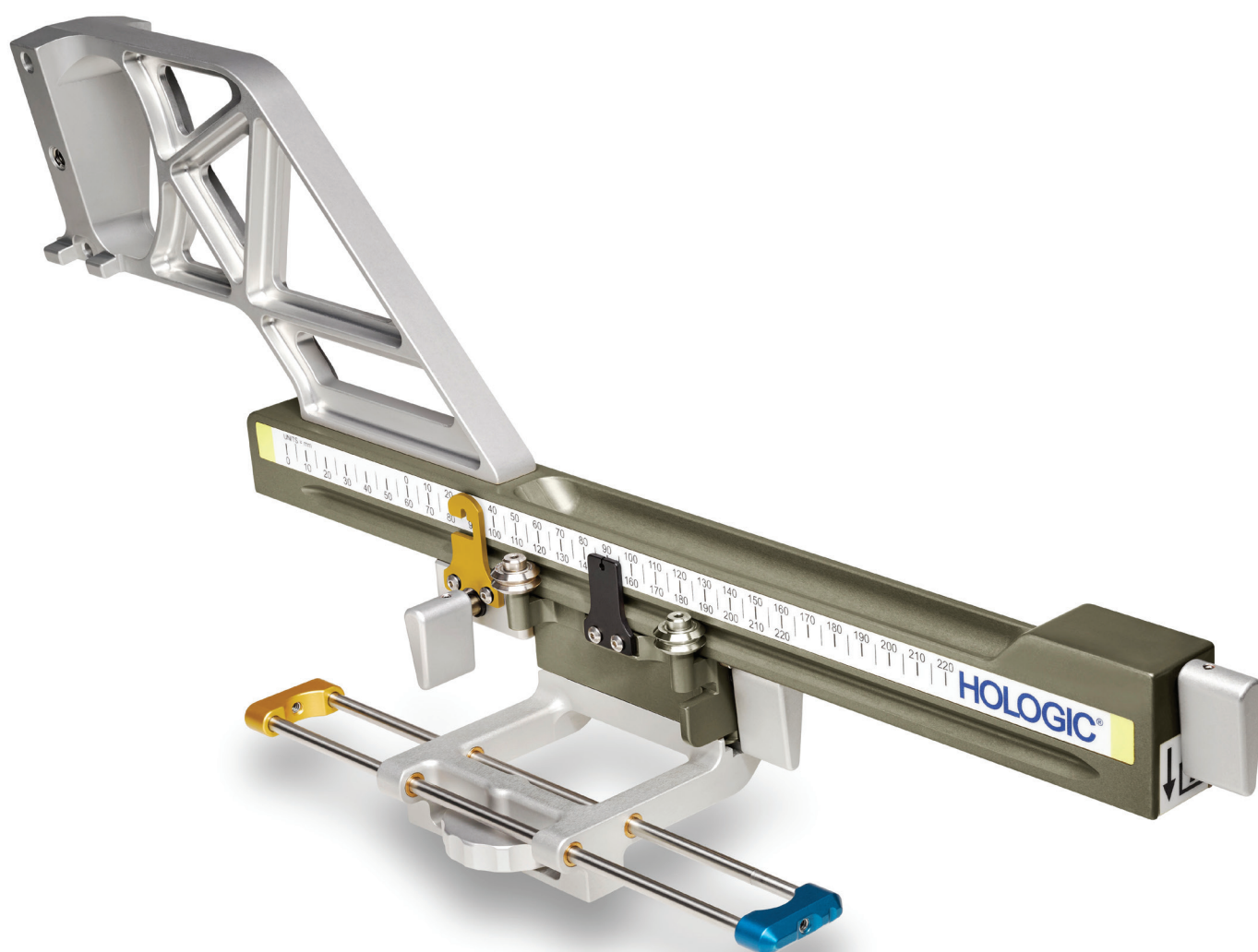

Facile accesso alla lesione.

Migliora l'accesso alla lesione in caso di mammelle particolarmente sottili (< 3 cm), accedendo alla lesione perpendicolarmente rispetto alla direzione di compressione. Questo fornisce spazio sufficiente per raggiungere la lesione e sparare l'ago tenendolo parallelo al detettore, senza colpire la piattaforma di compressione o trapassare la mammella.



Posizionamento flessibile della paziente.

Posizionare le pazienti in spazi limitati è sempre una sfida. Il braccio laterale Affirm™ offre una serie di opzioni per le sale per biopsia dove il posizionamento in decubito o la rotazione del braccio a C potrebbero essere impraticabili. Spesso le pazienti possono rimanere sedute senza pregiudicare l'accessibilità alla lesione.




Visualizzazione intuitiva dell'ago.



L'esperienza ha migliorato la visualizzazione 3D™ dell'ago per biopsia nella mammella eliminando gli artefatti dell'imaging riscontrati nell'approccio standard. La posizione dell'ago parallela al detettore rende più facile visualizzare l'apertura dell'ago e più intuitivo effettuare le regolazioni.

A te la scelta. Il braccio laterale Affirm™ può essere montato sul modulo guida per biopsia sia sul lato sinistro che su quello destro. È sufficiente determinare l'approccio desiderato, montare il braccio laterale e seguire le istruzioni sullo schermo.

Braccio laterale con approccio da sinistra

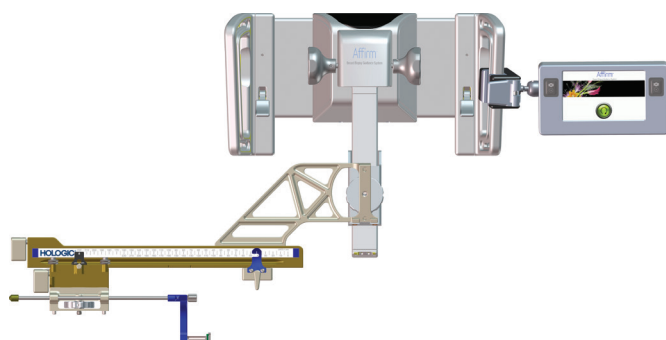

Braccio laterale con approccio da destra

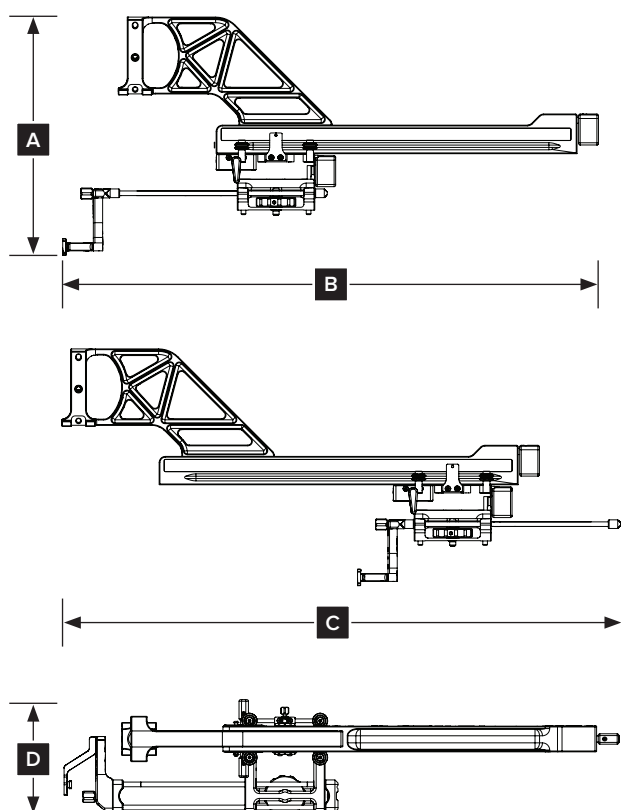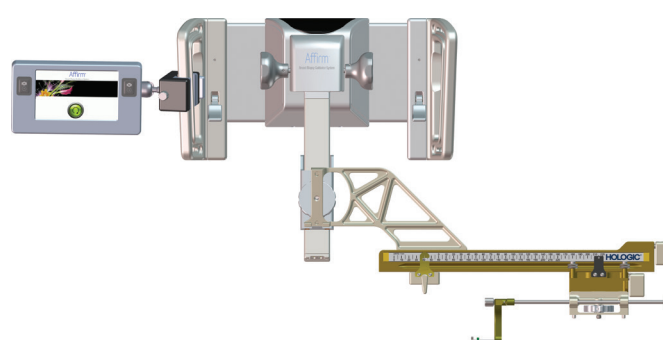

Braccio laterale - Specifiche

A. Altezza	24,4 cm (9,6 pollici)
B. Larghezza (supporto del dispositivo per biopsia e guida ago estesa verso il supporto del braccio laterale)	53,0 cm (20,9 pollici)
C. Larghezza (supporto del dispositivo per biopsia e guida ago estesa lontano dal supporto del braccio laterale)	57,4 cm (22,6 pollici)
D. Profondità	11,5 cm (4,5 pollici)
E. Peso	1,24 kg (2,73 libbre)

Braccio laterale - Range di movimento

Accuratezza del modulo guida per biopsia e del braccio laterale	Deviazione massima: 1 mm in entrambe le direzioni della coordinata del target
Accuratezza combinata del modulo guida per biopsia, del braccio laterale e del dispositivo per biopsia	Deviazione massima: 2 mm in entrambe le direzioni della coordinata del target
Range di movimento	Asse X laterale: 22 cm

www.hologic.com | info@hologic.com

**Sede centrale di Hologic
Stati Uniti / America Latina**
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
USA Tel: +1.508.263.2900
Ufficio vendite: +1.781.999.7453
Fax: +1.781.280.0668

Hologic Europe
The Coporate Village
Da Vincilaan 5
Building Caprese, 8th floor
1935 Zaventem, Belgio
Tel: +32.2.711.4680
Fax: +32.2.725.2087

Hologic Asia Pacific
7th Floor, Biotech Centre 2
No. 11 Science Park West Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin, New Territories, Hong Kong
Tel: +852.3748.7700
Fax: +852.3526.0723

Hologic Australia
Suite 402, Level 4
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Australia
Tel: +61.2.9888.8000
Fax: +61.2.9870.7555

DS-09246-ITA-IT Rev.001 (9/16) Hologic Inc. ©2016 Tutti i diritti riservati. Hologic, 3D, 3D Mammography, Affirm, Dimensions, Eviva, Selenia, The Science of Sure, e i loghi associati sono marchi di fabbrica e/o marchi depositati di Hologic, Inc., e/o sue filiali negli USA e/o negli altri paesi. Le informazioni presentate in questa sede sono rivolte a personale medico negli Stati Uniti e in altri mercati e non costituiscono offerta promozionale di prodotti dove le attività promozionali sono vietate. Poiché il materiale Hologic è distribuito attraverso pagine web, trasmissioni elettroniche e fiere specializzate, non è sempre possibile controllare dove tale materiale sia presente. Per maggiori informazioni sui prodotti in vendita in un determinato paese contattare il rappresentante di zona Hologic.