

GYN Surgical Solutions

Catalogo dei prodotti

Quasi due decenni di esperienza e risultati¹

La procedura NovaSure è un metodo semplice per ridurre o arrestare il sanguinamento nelle donne con flusso mestruale abbondante (FMA)²

- ✓ Efficace
- ✓ Sicuro
- ✓ Intelligente
- ✓ Personalizzato
- ✓ Rapido
- ✓ Dimostrato



Perché NovaSure?



La **Smart Depth™ Technology** offre agli operatori sanitari un sistema di ablazione endometriale sicuro ed efficace*

Intelligente²



La tecnologia consente di **monitorare l'impedenza del tessuto** e calcola il livello ottimale di potenza per il trattamento della cavità uterina.

Efficace²



Il sistema brevettato Moisture Transport™ **permette il contatto costante tra il tessuto uterino e la rete** ed elimina qualsiasi sottoprodotto anche quando la cavità uterina è irregolare, senza bisogno di dilatazione. Non occorrono trattamenti preliminari e l'intervento può avvenire indipendentemente dal ciclo mestruale.

Sicuro²



Il test di integrità della cavità uterina è in grado di individuare eventuali perforazioni piccole quanto un ago con calibro di 18. Inoltre, l'impedenza controlla la profondità di ablazione; la procedura si interrompe quando vengono raggiunti i 50 ohm.

Dimostrato¹



Quasi **due decenni di esperienza e risultati dimostrati** a breve e lungo termine grazie a **più di 80 studi**.

Perché MyoSure?

Una soluzione rapida e pratica per l'eliminazione di patologie uterine (polipi, miomi sottomucosi, prodotti trattenuti del concepimento ecc.)*

Asportazione meccanica³



Preserva la forma e la funzionalità dell'utero, **fornendo un campione del tessuto asportato** (senza artefatti termici) per l'esame istologico.

Visualizzazione diretta³




Visualizzazione completa della procedura grazie all'isteroscopia Omni™, per seguire il principio **"See and Treat"** con un solo strumento.

Aspirazione simultanea⁴



Insieme al sistema di gestione dei fluidi, l'aspirazione del tessuto asportato mediante il dispositivo consente di **mantenere un campo visivo chiaro.**

Rischio minimo³

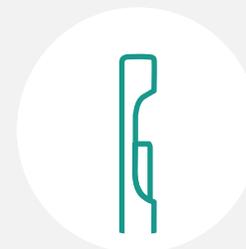

Soluzione ottimizzata per consentire un **migliore contatto con il tessuto**, favorire un'**asportazione più efficace** e **ridurre al minimo il rischio di perforazione.**

Gamma dei dispositivi*

Soluzioni per diverse patologie

Il sistema MyoSure con l'isteroscopio Omni™ offre un modo rapido e pratico per asportare meccanicamente diverse patologie uterine (polipi, miomi sottomucosi, prodotti trattenuti del concepimento ecc.)⁵



▶ **MYOSURE MANUAL**
Biopsia guidata e polipi ≤ 1 cm

▶ **MYOSURE LITE**
Biopsia guidata e polipi ≤ 3 cm

▶ **MYOSURE REACH**
Miomi sottomucosi ≤ 3 cm e tutti i polipi

▶ **MYOSURE XL**
Miomi sottomucosi ≤ 5 cm e tutti i polipi

Perché Omni™?

Il principio "See and Treat" a un livello superiore*

Isteroscopia 2 in 1



Un solo strumento per
diagnosi e trattamento

Lente cilindrica



Visualizzazione di
alta qualità in tutte le
procedure

Lunghezza di lavoro



La lunghezza di
lavoro di 200 mm
facilita l'accesso e il
trattamento in pazienti
di corporatura robusta

Diametro ridotto e forma ovale



Inserimento facilitato
e maggiore comfort
per la paziente

2 opzioni inclinazione e punta



angolo di 0° e
punta dritta



angolo di 30° e
punta bisellata




L'isteroscopia Omni™
con angolo di 0° e
punta dritta e con
angolo di 30° e punta
bisellata facilita
l'inserimento

Dotazioni*



2 opzioni: angolo di 0° e punta dritta o angolo di 30° e punta bisellata

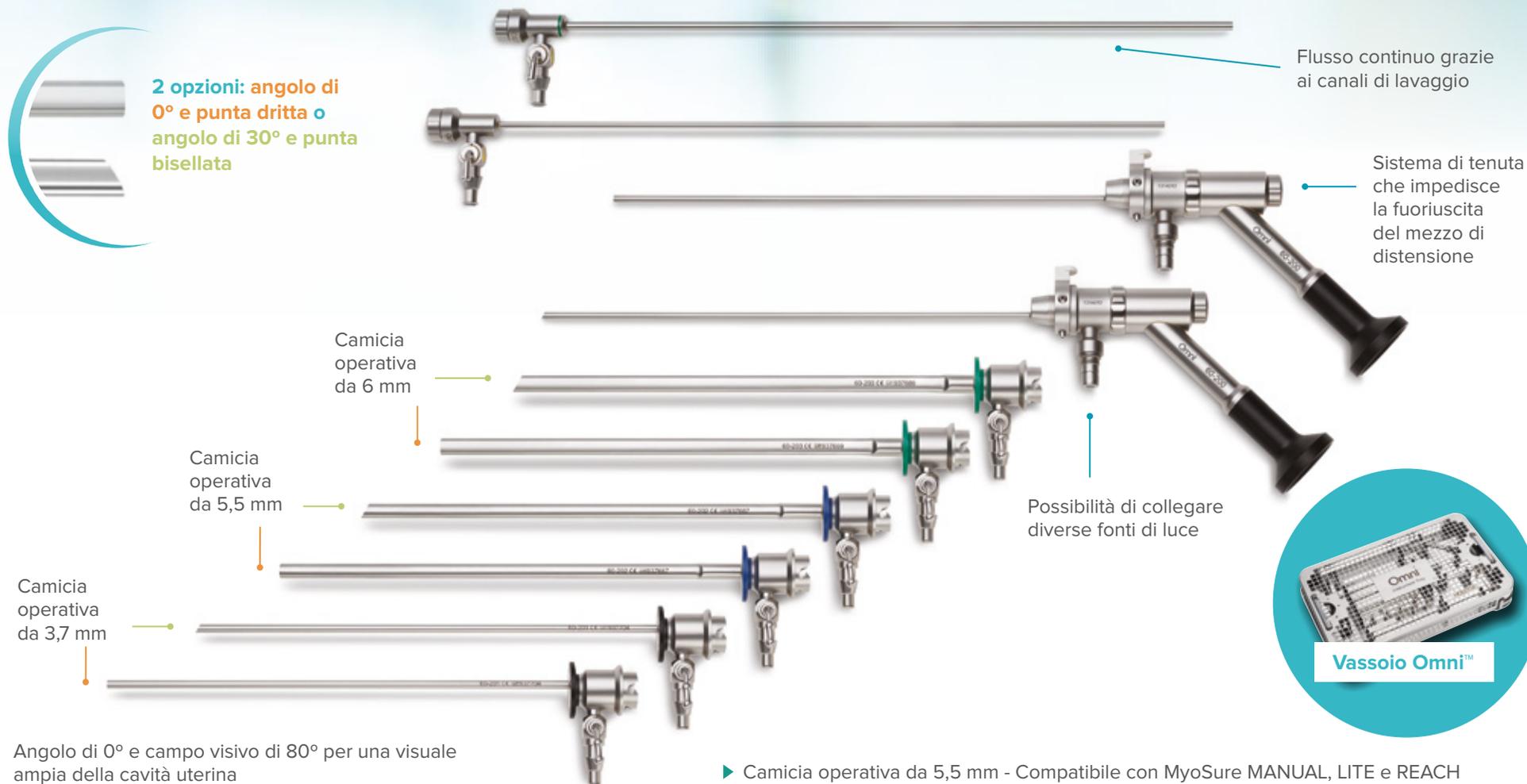

Flusso continuo grazie ai canali di lavaggio

Sistema di tenuta che impedisce la fuoriuscita del mezzo di distensione

Camicia operativa da 6 mm

Camicia operativa da 5,5 mm

Camicia operativa da 3,7 mm

Possibilità di collegare diverse fonti di luce



Vassoio Omni™

Angolo di 0° e campo visivo di 80° per una visuale ampia della cavità uterina

- ▶ Camicia operativa da 5,5 mm - Compatibile con MyoSure MANUAL, LITE e REACH
- ▶ Camicia operativa da 6 mm - Compatibile con MyoSure MANUAL, LITE, REACH e XL

FLUENT[®]
Fluid Management System

Trasformiamo la gestione dei fluidi

Il sistema Fluent nasce grazie ai riscontri del personale sanitario che conosce in prima persona le complessità della gestione del liquido di distensione.⁶



Perché Fluent?

Procedura isteroscopica semplificata e miglior controllo*

Montaggio facilitato



- **Meno requisiti** per tubi e collegamenti
- **Display touchscreen intuitivo**
- **Una sola sacca** per la raccolta dei materiali di scarto
- **Avvisi visivi e acustici** (deficit del mezzo di distensione e sacca degli scarti)

Tecnologia avanzata



- **Visualizzazione migliore** grazie alla nuova pompa peristaltica a circuito doppio: ottimizza il controllo del deficit del mezzo di distensione e della pressione intrauterina e consente di usare meno liquido.
- **Controllo avanzato della pressione**
La paziente assorbe meno liquido, la sicurezza aumenta e si riduce il rischio di intravasazione. Minore è la pressione, migliori sono i risultati.
- **Letture precise e automatiche** del deficit del mezzo di distensione
- Tecnologia **FloPak™**
Tutti i materiali di consumo in un unico kit**

Risparmio di tempo e spazio



- **Kit procedurali tutto in uno**
- **Minori** esigenze in termini di **apparecchiature**: Console MyoSure integrata.

Codici dei prodotti

NovaSure® Endometrial Ablation

NSV5-003 Dispositivo NovaSure
(confezione da 3)

RFC2010 Console NovaSure

815012 Bombole di CO₂ (confezione da 5)

MyoSure® Tissue Removal Device

20-403ML Dispositivo di rimozione dei tessuti
MyoSure MANUAL (confezione da 3)

30-403LITE Dispositivo di rimozione dei tessuti
MyoSure LITE (confezione da 3)

10-403FC Dispositivo di rimozione dei tessuti
MyoSure REACH (confezione da 3)

50-503XL Dispositivo di rimozione dei tessuti
MyoSure XL (confezione da 3)

50-603XL Dispositivo di rimozione dei tessuti
MyoSure XL per Fluent (confezione da 3)

10-550 Console MyoSure (pedale incluso)

40-902 Tappi di tenuta (confezione da 10)

60-5FR Tappi di tenuta per strumenti 5 Fr.
(confezione da 10)

Omni™ Hysteroscope

60-250-1 Isteroscopio Omni 0° - Standard Kit
(3 camicie: 3,7 mm - 5,5 mm - 6 mm)

60-250-2 Isteroscopio Omni 0° - Light Kit
(2 camicie: 3,7 mm - 5,5 mm)

60-250-30-1 Isteroscopio Omni 30° - Standard Kit
(3 camicie: 3,7 mm - 5,5 mm - 6 mm)

60-250-30-2 Isteroscopio Omni 30° - Light Kit
(2 camicie: 3,7 mm - 5,5 mm)

60-903-1 Vassoio di sterilizzazione e conservazione
Omni

FLUENT® Fluid Management System

FLT-100 Sistema di gestione dei fluidi Fluent

FLT-112 Kit procedurale Fluent (confezione da 6)

FLT-005 Sacca per la raccolta dei materiali di scarto Fluent
(confezione da 5)

FLT-010 Raccogliore di tessuto monouso (confezione da 10)

Bibliografia

* Manuali utente: **MyoSure Reach**, MAN-08793-9940 San Diego, CA; Hologic, Inc., 2023; **MyoSure Lite**, MAN-08793-9940 San Diego, CA; Hologic, Inc. 2023; **MyoSure XL**, MAN-08793-9940, San Diego, CA; Hologic, Inc., 2023; **Fluent**, AW-23612-701 San Diego, CA; Hologic, Inc. 2022; **Omni 0°**, MAN-05585-9940 San Diego, CA; Hologic, Inc., 2022; **Omni 30°** Manual MAN-07311-9940 San Diego, CA; Hologic, Inc., 2021; **NovaSure V5** MAN-08932-4270 San Diego, CA; Hologic, Inc., 2023.

1. Wortman M. Endometrial ablation: past, present, and future. Part II. Surg Technol Int. 2018 Nov 11;33:161-177.
2. Laberge PY, NovaSure™: the bipolar radiofrequency endometrial ablation system for dysfunctional uterine bleeding. Women's Health 2006; 2(5):687-693
3. Scheiber MD, Chen SH. A prospective multicenter registry of patients undergoing hysteroscopic morcellation of uterine polyps and myomas. J Gynecol Surg 2016;32(6):318-323.
4. Amin-Hanjani S. MyoSure MANUAL Device and the Benefits of Office-Based Hysteroscopy. The MyoSure Tissue Removal Suite: Real-world Experience and Clinical Data. 2020. Hologic MyoSure Monograph, MED-00432-EUR-EN Rev 001
5. Munro MG. Challenging Pathology and Expanded Use of the MyoSure System. The MyoSure Tissue Removal Suite: Real-world Experience and Clinical Data. 2020. Hologic MyoSure Monograph, MED-00432-EUR-EN Rev 001
6. Umranikar, Sameer, et al. "BSGE/ESGE guideline on management of fluid distension media in operative hysteroscopy." Gynecological Surgery 13 (2016): 289-303.
7. Hologic, Inc. Data on file; 2004-2018. Based on units shipped from 2004-2018.

HOLOGIC®

Per maggiori informazioni,
contattare il rappresentante
Hologic di zona o visitare il
sito **hologic.it**

Hologic cerca di sensibilizzare promuovere la conoscenza dei trattamenti per il flusso mestruale abbondante (FMA). Una donna su cinque soffre di FMA, ma può risolvere o mitigare il problema sottoponendosi a uno di questi trattamenti.

Visita il nostro sito web: **www.hologic.it**

Surgical Solutions | Hologic.it | marketing.italy@hologic.com

CE 2797 **EC REP** Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium.

PB-00725-ITA-IT Rev.002

©2024 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Hologic, The Science of Sure, MyoSure, NovaSure, Omni, Fluent e i loghi associati sono marchi commerciali o marchi commerciali depositati di o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il contenuto di questo documento riveste carattere puramente informativo e non va inteso come consulenza medica. Contattare un medico professionista per consulenze specifiche riguardo alla propria salute e alle terapie disponibili. Queste informazioni sono destinate alla distribuzione nel Regno Unito. Non costituiscono offerta promozionale di prodotti nei paesi in cui le attività promozionali sono vietate.